




# 山东绿都生物科技有限公司

## ShanPbg Lvdu Bio-Sciences & Technology Co.,Ltd.

### Pb 原料质量报告

#### 一、Pb 单抗效价与抑制实验

本实验在偶联抗原稀释度 5W 倍下初筛 Pb 单抗效价为 20W，灵敏度 5ppb。

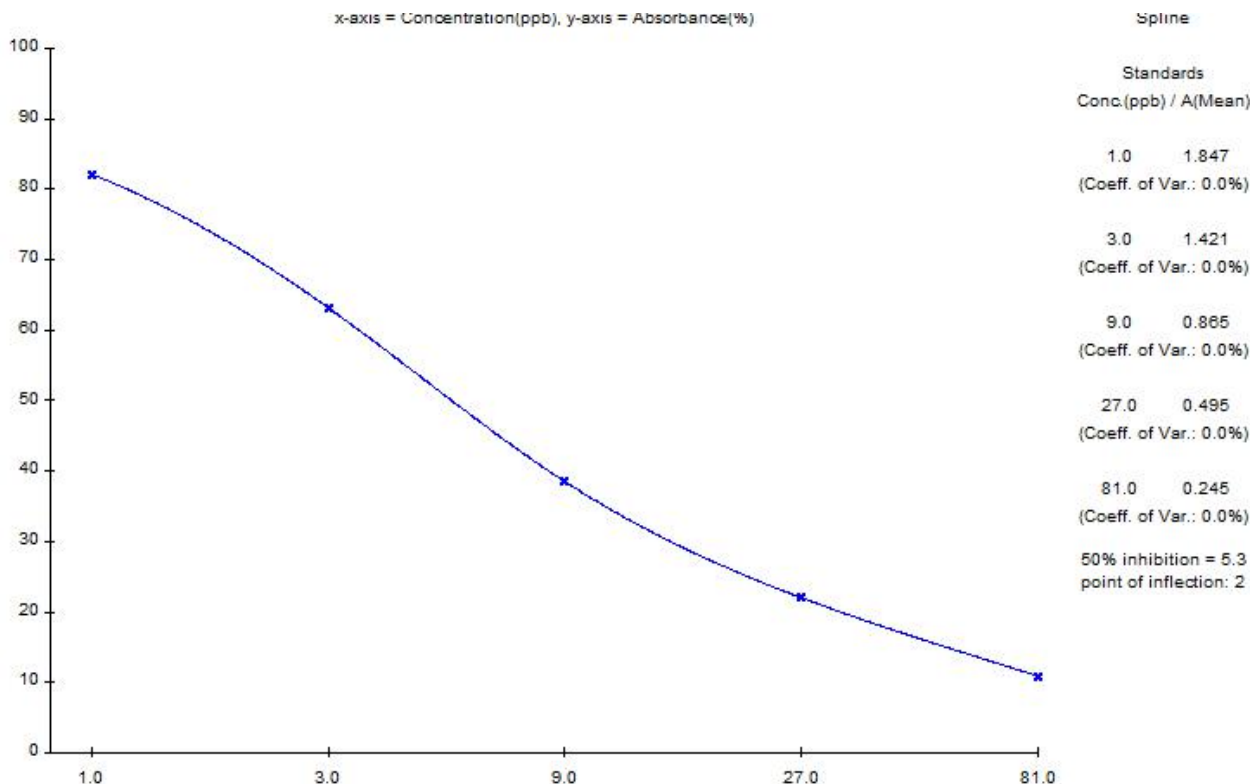

标准曲线图

Standards						
Ser. No.	Concentration ppb	Absorbance (Mean)	(CV)	B/B0 (%)	calculated ppb	Deviation (%)
1	0.0	2.248	0.0	100.0		
2	1.0	1.847	0.0	82.2	1.0	0.0
3	3.0	1.421	0.0	63.2	3.0	0.0
4	9.0	0.865	0.0	38.5	9.0	0.0
5	27.0	0.495	0.0	22.0	27.0	0.0
6	81.0	0.245	0.0	10.9	81.0	0.0

数据分析图



## 山东绿都生物科技有限公司

### ShanPbg Lvdu Bio-Sciences & Technology Co.,Ltd.

说明：1. Mean 表示吸光度值的平均值；

2. CV 指平行吸光度值的变异系数，也就是平行孔的差异；



3.本曲线是在偶联抗原最佳稀释度5W 倍，抗体稀释 20W 倍组合下的曲线，标准曲线的线性  $r^2 > 0.99$ 。

#### 二、试剂盒特异性实验

药物名称	交叉反应率 (%)
Pb	100%
Cd	< 1%

#### 三、胶体金特性

胶体金的灵敏度为 250 ppb，完全消线，线条清晰。

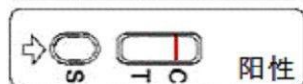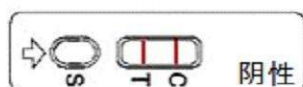

以下两种情况无效

